


POSITIVE TEST RESULTS ADDITIONAL REFERENCE IMAGES

InteliSwab[™]
COVID-19 RAPID TEST • Rx

This card provides additional examples of what a positive result could look like. Use the **Instructions for Use** included in the box to complete your test. Upon completion, if you think you have a positive result but are unsure, please compare your test to the images below.

EXAMPLES OF POSITIVE TEST RESULTS

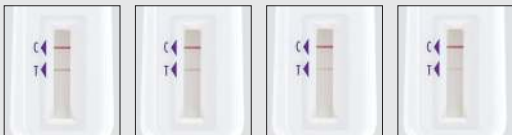

These photos show how faint the line next to the “T” may be. These are all positive test results. In some cases, the line next to the “C” may be very faint.



Look very closely!

The bottom line may be **very faint**.

Any line next to the “T” means you may have COVID-19, even if the line is very faint.

THE TEST RESULT IS ALSO POSITIVE IF:



There is a line next to the “T” and **NO** line next to the “C”

If your test does not look like any of these, see **Instructions for Use** for more examples of test results. **Be sure to follow all instructions.**

This product has not been FDA cleared or approved; but has been authorized by FDA under an EUA; This product has been authorized only for the detection of proteins from SARS- CoV-2, not for any other viruses or pathogens; and, This product is only authorized for the duration of the declaration that circumstances exist justifying the authorization of emergency use of in vitro diagnostics for detection and/or diagnosis of COVID-19 under Section 564(b)(1) of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), unless the declaration is terminated or authorization is revoked sooner.

Para obtener información en español, vea el reverso.


RESULTADOS DE PRUEBA POSITIVOS

OTRAS IMÁGENES DE REFERENCIA

InteliSwab™
COVID-19 RAPID TEST • Rx

Esta tarjeta ofrece más ejemplos de cómo podría verse un resultado positivo. Para hacer la prueba, utilice las **Instrucciones de uso** que se incluyen en la caja. Una vez que haya terminado, si piensa que el resultado es positivo, pero no está seguro, compare su prueba con las imágenes siguientes.

EJEMPLOS DE RESULTADO POSITIVO

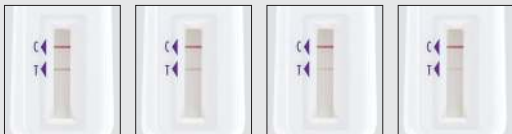

Estas fotos muestran qué tan tenue puede ser la línea al lado de la “T”. Todos estos resultados son positivos a la prueba. En algunos casos, la línea al lado de la “C” podría ser muy tenue.



¡Fíjese bien!

La línea de abajo puede ser **muy tenue**.

Una línea al lado de la “T” significa que usted podría tener COVID-19, aunque la línea sea muy tenue.

EL RESULTADO DE LA PRUEBA TAMBIÉN ES POSITIVO SI:



Hay una línea al lado de la “T” y **NO** hay línea al lado de la “C”

Si su prueba no se parece a ninguna de estas, consulte más ejemplos de resultados de la prueba en las **Instrucciones de uso**. **Asegúrese de seguir todas las instrucciones.**

Este producto no ha sido autorizado o aprobado por la FDA; no obstante, ha sido autorizado por la FDA de conformidad con una Autorización de Uso de Emergencia (EUA); Este producto solo ha sido autorizado para detectar proteínas del SARS-CoV-2 y no para ningún otro virus o patógeno; asimismo, este producto solo está autorizado mientras dure la declaración de que existen circunstancias que justifican la autorización del uso de emergencia de diagnósticos in vitro para la detección y/o el diagnóstico de la COVID-19 en virtud de la Sección 564(b)(1) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), a menos que la declaración se cancele o que la autorización se revoque antes.

For information in English, see the reverse.